

MAGNETOTERAPEUTICKÝ PRÍSTROJ MAG 204N



NÁVOD NA POUŽITIE

CE 0476



www.pulznamagnetoterapia.sk

OBSAH

CHARAKTERISTIKA PRÍSTROJA	strana 2
DOLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	strana 3
BEZPEČNOSŤ	strana 4
ČISTENIE PRÍSTROJA	strana 4
ZÁRUKA	strana 4
OBSAH BALENIA	strana 5
POPIS ZARIADENIA	strana 6
NÁVOD NA POUŽITIE	strana 7
MAGNETICKÝ APLIKÁTOR DM100 (návod na použitie)	strana 10
BIO-PRÍSLUŠENSTVO (návod na použitie)	strana 11
BIO-PRÍSLUŠENSTVO (zoznam)	strana 12
SVALY NÁŠHO TELA	strana 16
ZOZNAM PROGRAMOV	strana 17
CERTIFIKÁTY	strana 74
TECHNICKÉ INFORMÁCIE	strana 76

Prečítajte si manuál pred prvým použitím. Dôrazne doporučujeme používať prístroj presne podľa návodu a dodržiavať bezpečnostné opatrenia uvedené v prevádzkových inštrukciách v tomto návode.

CHARAKTERISTIKA PRÍSTROJA

Prístroj MAG 204N je model s najvyšším stupňom technológie. Je vhodný na použitie v rehabilitačných centrách, nemocniciach, súkromných klinikách a v domácnosti na konkrétne magnetoterapeutické terapie mnohých chorôb rôznej povahy.

MAG 204N sa vďaka profesionalite a výkonu radí k špičke fyzioterapeutických elektrických prístrojov a je výsledkom tridsaťročného výskumu špecialistov v odvetví. Je doň vložená celá dodnes známa technológia používaná aj na najlepších klinikách, vo fyzioterapeutických centrách a športovom lekárstve.

Je dokázané, že pulzná magnetoterapia je účinná pri podpornej liečbe veľkého množstva chorôb. Účinky magnetoterapie: analgetický, myorelaxačný, vazodilatačný, protizápalový a protireumatický, stimulačný, detoxikačný, regeneračný, hojivý, imunitný (posilňuje imunitu).

MAG 204N po prvýkrát zjednocuje nízkofrekvenčnú, vysokofrekvenčnú magnetoterapiu a svetelnú terapiu. Takýmto spôsobom sa podarilo vyrobiť dvojaký prístroj jediný svojho druhu, ktorý je schopný vysokého výkonu.

Predstavuje maximum technológie na profesionálnu aj domácu starostlivosť, pričom využíva na obmedzenom priestore to najlepšie z magnetoterapie:

- nízku frekvenciu (do 100 Hz) - analgetický účinok
- vysokú frekvenciu (do 27,1 MHz) - protizápalový účinok

Má 4 nezávislé výstupné kanály s možnosťou aplikácie u dvoch pacientoch súčasne a každý pacient má svoj terapeutický program.

Prístroj má 68 programov (nízka frekvencia) a 68 programov (vysoká frekvencia) na podpornú liečbu bolesti hlavy, pohybového aparátu, svalov, zápalových a nezápalových ochorení, poškodenia kostí, kožných ochorení a zranení, krvných zrazenín a ďalších zdravotných problémov a 5 programov na svetelnú terapiu s aplikátorom CHROMO.

Výhody

- neinvazívna podporná liečba
- bezbolestné
- žiadne vedľajšie účinky
- bezpečné použitie
- jednoduché použitie
- kompaktné

DOLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Kontraindikácie:

Kedy nesmie byť magnetoterapia a svetelná terapia používaná.

- V tehotenstve. Napriek tomu, že nie sú známe správy o negatívnom pôsobení magnetických polí, je nutná predbežná opatrnosť.
- Pri používaní citlivých lekárskech elektronických zariadení ako sú kardiostimulátor a iné môže magnetoterapia spôsobiť elektrické rušenie správneho fungovania týchto zariadení.
- Pri krvácaní akéhokoľvek pôvodu.
- Pri akútnej tuberkulóze.
- U osôb s diagnózou tumoru a po operácii zhubného nádoru alebo liečbe chemoterapiou (podľa zváženia lekára).
- U žiadnej infekčnej alebo mykotickej (plesňovej) chorobe.
- Pri záchvatovitých neurologických ochoreniach ako je epilepsia a iné.
- U bolesti neznámeho pôvodu v brušnej oblasti.
- Pri hematologických ochoreniach (ochorenia krvi).
- Pri extrémne nízkom krvnom tlaku (hypotenzii).
- Dva dni pred a dva dni po menštruácii (individuálne). Ak aplikujeme magnetoterapiu mimo uvedeného obdobia, tak sú bolesti počas menštruácie miernejšie. V dobe menštruácie samozrejme je možné aplikovať magnetoterapiu mimo bedrovej oblasti.
- Neodporúča sa kombinácia s liečbou steroidmi a elektrolytickou. Naopak, kombinácia so svetelnou terapiou je ideálna.
- Uchovávať mimo dosah detí.
- Nepoužívať magnetický aplikátor v oblasti očí.

Veľmi dôležité je, aby v priebehu terapie pulzným magnetickým poľom neboli uskutočňované žiadne rentgenové vyšetrenia alebo liečba ožarovaním (mimo svetelnej terapie). Tieto vyšetrovacie metódy negatívne pôsobia na dosiahnuté výsledky terapie. Regeneračné procesy, ktoré boli naštartované, tým bývajú prerušené. Po dlhšom ožarovaní rentgenovými alebo inými paprskami je magnetoterapia menej účinná.

BEZPEČNOSŤ

Dôrazne doporučujeme používať prístroj presne podľa návodu a dodržiavať bezpečnostné opatrenia uvedené v prevádzkových inštrukciách v tomto návode.

- Používajte len originálny adaptér.
- Nepoužívajte tento prístroj v prostredí, kde sa nachádzajú iné zariadenia, ktoré do prostredia vyžarujú elektromagnetickú energiu.
- Nepoužívajte prístroj v spojení s vysoko frekvenčnými chirurgickými zariadeniami alebo mikrovlnnými alebo krátkovlnnými liečebnými systémami.
- Nepoužívajte prístroj v prítomnosti elektronického monitorovacieho zariadenia (napr. srdcové monitory, EKG), ktoré nemusia pracovať správne, keď je zariadenie v prevádzke.
- Používajte len originálne príslušenstvo doporučené výrobcom.
- Príslušenstvo ako náhle vykazuje známky poškodenia musí byť vymenené.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu a chráňte ho proti nečistotám a vlhkosti.
- Vhodnosť magnetoterapie konzultujte s vaším lekárom.
- Prístroj sa nesmie používať vo vode, alebo v obzvlášť vlhkom prostredí.
- Prístroj položte na rovný povrch, aby sa zabránilo náhodnému pádu.

ČISTENIE PRÍSTROJA

- 1) Vypnite prístroj a odpojte všetky káble zo zariadenia.
- 2) Vyčistite jemne navlhčenou handričkou (alebo handričkou namočenou v neutrálnom čistiacom roztoku) a jemne utrite.

Nepoužívajte chemické látky (ako riedidlo, benzín).

Nedovoľte, aby sa voda dostala do vnútorného priestoru.

ZÁRUKA

Výrobca poskytuje záruku po dobu 72 mesiacov od dátumu nákupu týkajúcu sa mechanických a elektrických výrobných chýb, ak je zariadenie používané v súlade s pokynmi v tomto dokumente. Na vady alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho používania, alebo zneužitia sa táto záruka nevzťahuje. K dispozícii nie sú žiadne zariadenia na opravu užívateľom. Akékoľvek pokusy o opravu neautorizovanými osobami zaniká záruka. Toto nemá vplyv na zákonné práva. 6 ročná záruka sa nevzťahuje na magnetický aplikátor, elastické popruhy, káble a biopríslušenstvo.


Výrobca neručí žiadnym spôsobom v súvislosti ublíženia na zdraví a / alebo škody na majetku vyplývajúce z použitia, kde takéto použitie nie je v prísnom súlade s pokynmi a bezpečnostnými opatreniami obsiahnutými v tomto návode pre MAG 204N, vrátane všetkých doplnkov.

OBSAH BALENIA

Zoznam	ks.
Prístroj MAG 204N	1
Manuál	1
Adaptér model 5024	1
Krátky elastický popruh	1
Dlhý elastický popruh	1
Aplikátory (nízka frekvencia) DM100	2
Aplikátor (vysoká frekvencia) BIOFR	1
Káble pre Bio príslušenstvo	2
Kufrík	1




POPIS ZARIADENIA

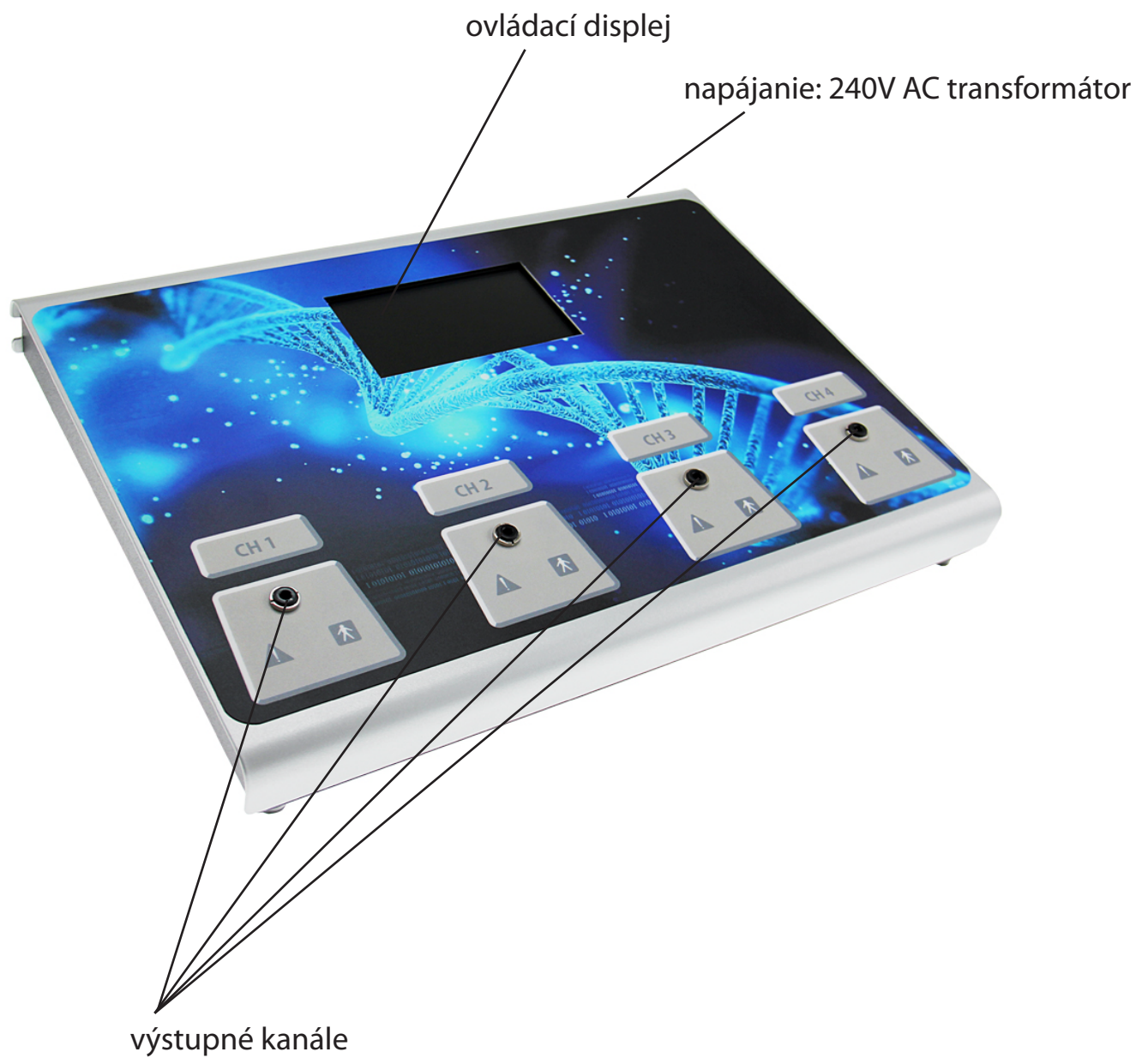

SPUSTENIE TERAPIE


- 1.** krok - dotknite sa displeja zariadenia na 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí logo „PlatiuMed“. Zariadenie je teraz pripravené na použitie. Dotykom na displej môžete pokračovať. V ľavom rohu je zobrazený nápis „Set Up“, kde dotykom si môžete nastaviť jazyk, jas, zvuk, všetko je optimálne prednastavené.

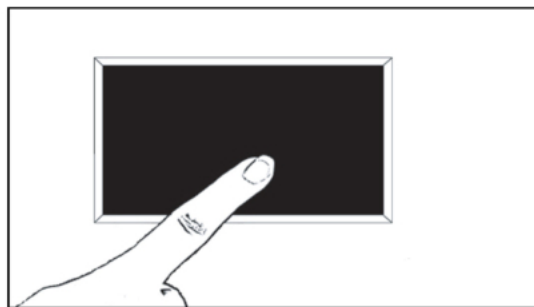


- 2.** krok - zapojte aplikátor, alebo aplikátory do výstupného kanálu „CH 1“, „CH 2“, „CH 3“, „CH 4“.




- 3.** krok - vyberte terapiu pre jednu, alebo dve osoby.

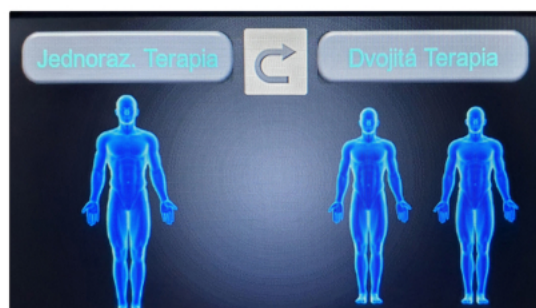


- 4.** krok - vyberte vhodnú ponuku pre magnetoterapiu, alebo svetelnú terapiu „Plus Light“. (pre svetelnú terapiu je špeciálny aplikátor).
Potvrdenie terapie krátkym dotyk na displeji.
„Bielou šípkou“ návrat na počet osôb.

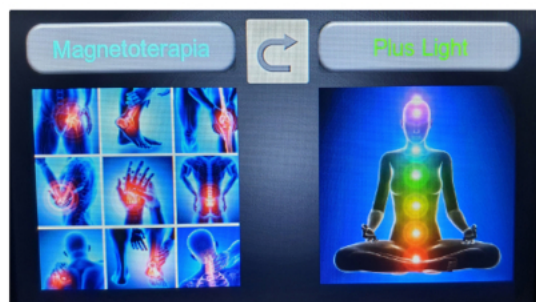

- 5.** krok - vyberte si program, ktorý chcete vykonať, listovaním v zozname „modré šípky“.
Keď nájdete požadovaný program potvrdte ho krátkym dotykem „Start“.
„Bielou šípkou“ návrat na výber terapie.

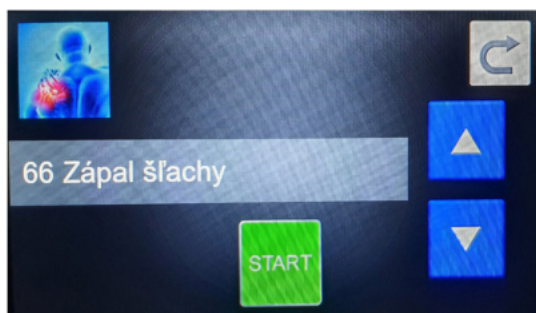

- 6.** krok - ak chcete začať terapiu dotknite sa tlačidla „START“ a potom dotknite sa „(Ch 1, 2, 3, 4)“ kde máte zapojený aplikátor, aby ste zapli požadovaný kanál. V tomto bode sa tlačidlo zmení na „žlté“.
Krátkym dotykem „Stop“ urobí sa pauza.
„Bielou šípkou“ návrat na výber programu.

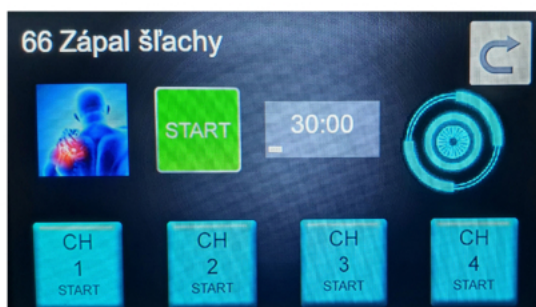

Po ukončení terapie, alebo nečinnosti sa zariadenie automaticky vypne za 5 minút.

Aplikátory odpojiť až po vypnutí zariadenia !

NÁVOD NA POUŽITIE: SVETELNÁ TERAPIA

SVETELNÁ TERAPIA

MAG 204N

Cirkulačný program - červené svetlo

Upokojujúci program - zelené svetlo


Stimulujúci program - žltá farba

Relaxačný program - modrá farba

Biodynamický program - kombinácia červenej, žltej, zelenej a modrej farby



Aplikátor CHROMO využíva samogenerovanú svetelnú energiu na vyvolanie určitej reakcie v tele, ktorá sa mení v závislosti od použitého programu a farby.

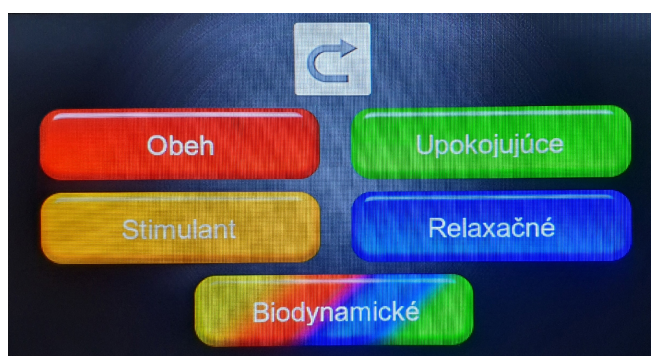

Terapiu spustíte keď v kroku 4. na strane 7 potvrdíte Plus Light. Ďalej pokračujete podľa návodu na strane 7.

Aplikátor je vyrobený s červenou stranou a priehľadnou stranou. Priehľadnú stranu nasmerujte výlučne na oblasť, kde sa má aplikovať terapia.

Dôležité: Dávajte pozor, aby ste nenasmerovali svetelný lúč smerom k očiam, alebo do ich blízkosti kým je program spustený. Aplikátor sa musí aplikovať v priamom kontakte s pokožkou, ktorá nesmie mať rany a vredy. Aplikátor upevníte pomocou elastických popruhov.

POUŽITIE DVOCH PROGRAMOV SÚČASNE

DÔLEŽITÉ: toto zariadenie umožňuje použitie dvoch programov súčasne, ako keby ste mali k dispozícii dve rôzne zariadenia! Používateľ si môže zvoliť dva rozdielne programy, alebo používať zariadenie súčasne s inou osobou. Každý z vás si môže vybrať svoj obľúbený program. Pre výber dvoch programov v **3. kroku** na strane 7 si vyberiete terapiu pre dve osoby.

PRED TÝM, NEŽ BUDETE KONTAKTOVAŤ ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie sa nezapne	- Je pripojené do el. siete?	- Skontrolujte adaptér
Program sa nezapne	- Zvolili ste program? - Stlačili ste správne tlačidlo?	- Zvoľte program - Stlačte tlačidlo "Start"
Zariadenie je bez el. energie	- Poškodený kábel - Je kábel vložený správne?	- Vymeňte kábel - Kábel skúste pripojiť znova
Žiadna stimulácia	- Pri spustení programu magnetoterapie necítite žiadnu stimuláciu	- Je úplne normálne, že pri používaní magnetoterapie necítite žiadnu stimuláciu
Zariadenie sa zastavilo	- Konektor magnetického aplikátora nie je vložený správne	- Konektor vložte správne a spustite program odznova

V prípade, ak problém neviete vyriešiť, kontaktuje zákaznícky servis.

NÁVOD NA POUŽITIE: MAGNETICKÝ APLIKÁTOR DM100

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Zariadenie obsahuje dva magnetické aplikátory, každý aplikátor má kladný pól (+) a záporný pól (-), vid' obrázok.
- Pri umiestňovaní aplikátorov na telo dbajte na označené póly – vid' obrázok.
- Magnetické aplikátory môžete aplikovať aj na oblečenie alebo sádku, aplikátory sa nemusia dotýkať pokožky.
- Magnetické aplikátory neaplikujte na otvorené rany alebo vredy.
- Konektory magnetických aplikátorov napojte do voľných výstupov zariadenia.
- Zapnuté zariadenie nevydáva žiadne vibrácie, nakoľko magnetické pole nie je možné zistiť bez špeciálnych zariadení na to určených.
- Dôležité: aby sa predišlo možným problémom, pred zapnutím zariadenia doň najprv pripojte konektory aplikátorov a až následne zariadenie zapnite, pokiaľ je zariadenie v prevádzke, konektor v žiadnom prípade neodpájajte.
- Reakcie na magnetoterapiu sa u pacientov rôznia.
- Pokiaľ ide o množstvo opakovaní magnetoterapie, zvyčajne sa odporúča použiť zariadenie 1 až 2 krát denne. Avšak, odporúčame sa o vhodnosti a častosti použitia magnetoterapie poradiť s vaším ošetrojúcim lekárom.
- Na strane 16 je znázornená mapa svalstva človeka, ktorá vám napomôže pri aplikácii magnetoterapie a takisto aj pri výbere vhodného miesta na aplikáciu magnetických aplikátorov.



UMIESTNENIE MAGNETICKÝCH APLIKÁTOROV

S cieľom dosiahnuť maximálnu účinnosť terapie je nevyhnutné, aby ste aplikátory aplikovali priamo na postihnuté miesto. Pri umiestňovaní aplikátorov dbajte na ich polaritu (znázornená v návode). Správne umiestnenie aplikátorov je pri magnetoterapii rozhodujúcim faktorom, nakoľko nesprávne umiestnenie aplikátora nebude mať pre váš zdravotný stav pozitívny efekt.

Pri procedúre môžete použiť buď jeden alebo dva aplikátory. Odporúčame, aby ste počas magnetoterapie používali max. dva aplikátory súčasne. V prípade použitia jedného aplikátora ho umiestnite stranou označenou (+) nadol (pozri napríklad umiestnenie na ruku).



V prípade použitia dvoch protiľahlých aplikátorov (napríklad jeden nad dlaňou a druhý pod dlaňou) umiestnite aplikátory tak, aby opozitné póly smerovali vždy k sebe (jedna strana + a druhá -, vid' obrázok). V prípade použitia dvoch aplikátorov vedľa seba umiestnite aplikátory na pokožku stranou označenou (+) nadol, vid' použitie na oblasť krčnej chrbtice.



UMIESTNENIE APLIKÁTOROV POMOCOU POPRUHOV

Magnetické aplikátory vložte pod elastické popruhy, ktoré sú súčasťou vybavenia zariadenia. V prípade, ak majú tieto popruhy aj vrecká, magnetické aplikátory môžete vložiť priamo do nich. Zariadenie má dva typy elastických popruhov, ktoré môžete zvoliť v závislosti od toho, na ktorú časť tela chcete magnetické aplikátory aplikovať.

- krátky elastický pás vkladajte iba jeden aplikátor
- dlhý elastický pás môžete vložiť až dva aplikátory

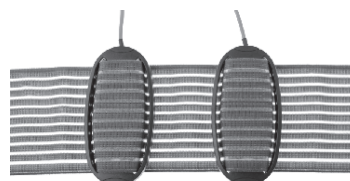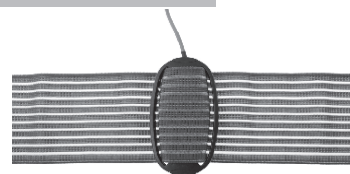

UMIESTNENIE APLIKÁTOROV S BIO-PRÍSLUŠENSTVOM (KORAL RELAX)

Magnetické aplikátory môžete používať spolu s bio-príslušenstvom vhodným na liečbu postihnutých oblastí. Vložte aplikátor do Bio príslušenstva (viď. obrázok). Liečba je takto ešte efektívnejšia.

NÁVOD NA POUŽITIE: BIO-PRÍSLUŠENSTVO (KORAL RELAX)

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pre tých, ktorí chcú zo svojho zariadenia vyťažiť čo najviac a pre tých, ktorí chcú zariadenie použiť na väčších plochách tela, odporúčame širokú ponuku Bio príslušenstva. Podľa veľkosti plochy, ktorú chcete na terapiu použiť, vyberte si aj zodpovedajúce príslušenstvo.

Všetko príslušenstvo je vyrobené z priedušného materiálu a je aj antibakteriálne ošetrené.

Upozornenie: z dôvodu delikátnosti povrchov a materiálov odporúčame všetko Bio príslušenstvo pravidelne čistiť v súlade s inštrukciami, ktoré nájdete na ich obale.

PRIPOJENIE BIO PRÍSLUŠENSTVA


Aby ste dosiahli čo najlepších výsledkov, odporúčame súčasne použiť magnetické aplikátory spolu s bio-príslušenstvom (viď. "Umiestnenie aplikátorov s Bio príslušenstvom").

Programy zariadenia ostávajú rovnaké, vyberte si ich podľa vašich potrieb.

- Ľahnite si do príjemnej polohy.
- Bio príslušenstvo pripojte do zariadenia pomocou dodaného kábla (konektor napojte do jedného z voľných výstupových kanálov, tlačidlo umiestnite priamo na Bio príslušenstvo).
- Voľbu programu potvrdíte stlačením tlačidla "Start".
- Aby ste začali terapiu spustíte požadované výstupné kanály stlačením tlačidla "Off Ch 1,2,3,4".



BIO-PRÍSLUŠENSTVO (KORAL RELAX)

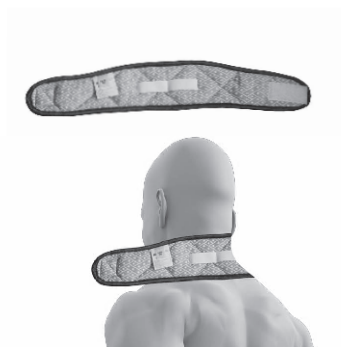


Krčný pás
Kód BIOFC

Použite na liečbu krku a krčnej oblasti (cervikálna artróza, stuhnutie šije, bolesti v oblasti krčnej chrbtice atď.).



Vesta
Kód BIOGIL

Použite pri liečbe a ošetrovaní hrudnej a chrbtovej oblasti (bolesti chrbta atď.).

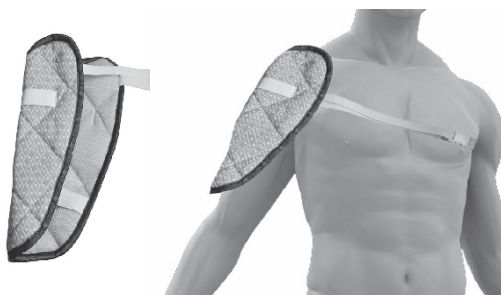

Ramenný pás
Kód BIOSPA

Použitie na rôzne oblasti tela, je vhodný pre viaceré ošetrované oblasti a liečby (artróza, artritída, periartritída, modriny, fraktúry, atď.).



Rukavica
Kód BIOGUA

Použite na ošetrovanie rúk (fraktúry, artróza, artritída, pocity brnenia, vyklbenia atď.).



Ľadvinový pás
Kód BIOFR

Použite na terapiu drierkovej, chrbtovej alebo brušnej oblasti (modriny, bolesti v drierku, menštruačné bolesti, artróza, artritída, prietrž atď.).



Maska na tvár
Kód BIOMASK

Použitie v oblasti tváre (vrásky, jazvy, akné, bolesti hlavy, bolesti v oblasti trojklanného nervu, zápal dutín, zápal ucha). Pomocou neho môžete aplikovať terapiu jednak komfortnejšie a jednak na väčšej oblasti.
(Použiť Systematický program č.01)



Papuče
Kód BIO CIA

S použitím týchto papuč môžete vykonávať celkovú terapiu nôh/chodidiel.



Pás na nohu / nastaviteľný
Kód BIOLEG

Použitie na terapiu kolien a nôh (lézie meniskusu, artritída, artróza atď.). Naťahuje sa na nohu.



Čižma na nohu
Kód BIOGAM

Použitie na terapiu nôh (výrony, artritída, artróza atď.).



Topánka členková
Kód BIOSTI

Použitie na terapiu vykonávanú v oblasti členka a nôh (bolesti päty, vyklbeniny atď.).



Helma
Kód BIOHEL

Použitie na terapiu hlavovej oblasti (bolesti hlavy, bolesti krčnej chrbtice atď.).
(Použiť Systematický program č.01)

Magnetická podložka
Kód MAGNETIC MAT

Použitie na unikátny “nočný” 4-hodinový program pomocou magnetickej podložky. (počas noci sa používa k pokračovaniu vykonávania denných procedúr, aby boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky, alebo na celkovú revitalizáciu a obnovu energie).



Symbole pre údržbu BIO-PRÍSLUŠENSTVA



čistiť
chemicky



nebieliť



nesušiť v
sušičke




nežehliť



ručné pranie
pri 30°C

SVALY NÁŠHO TELA

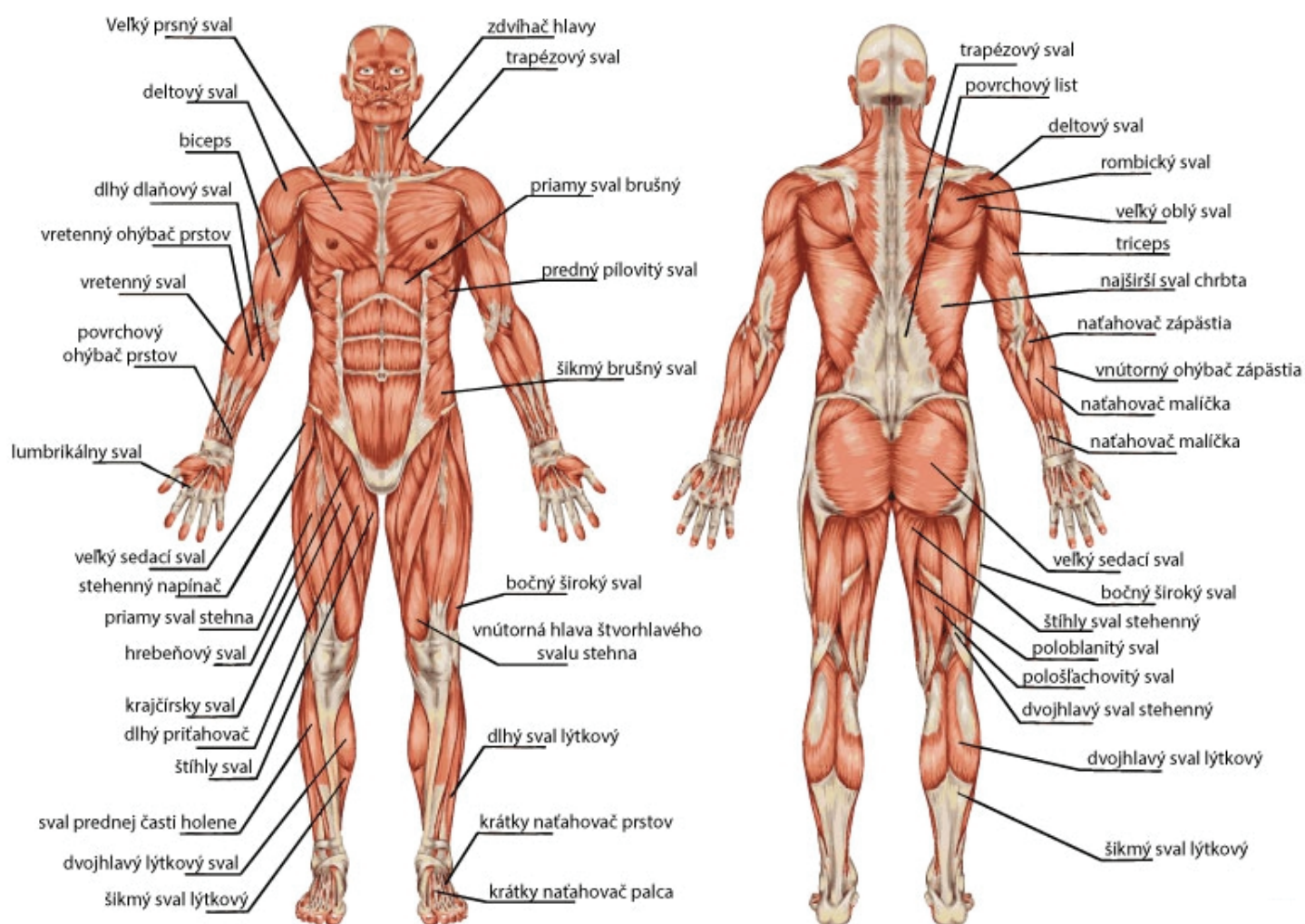

PROGRAMY

PROGRAM	TERAPIA
00	Výstupný test
01	Systematický program
02	Systematický intenzívny program
03	Boleť bruška chodidla
04	Artritida
05	Artróza bedrového kĺbu
06	Artróza členka
07	Artróza krčnej chrbtice
08	Artróza kolena
09	Artróza lakťa
10	Artróza prstov
11	Artróza chrbtice
12	Artróza všeobecne
13	Artróza bedrovej chrbtice
14	Artróza ruky
15	Artróza zápästia
16	Artróza ramena
17	Burzitída
18	Kolenná patelárna chondropatia
19	Pomliaždeniny
20	Diskopatia
21	Podvrtnutie kolena
22	Podvrtnutia
23	Boleť končatin
24	Boleť lakťa
25	Boleť zápästia
26	Boleť ruky
27	Boleť členka
28	Boleť krčnej chrbtice
29	Boleť chrbtice
30	Koxartróza
31	Boleť deltového svalu
32	Boleť štvorhlavého svalu
33	Boleť svalovej sústavy
34	Boleť chrbta

PROGRAMY

PROGRAM	TERAPIA
35	Bolešť ramena
36	Bolešť bedrovej chrbtice a bolešť v krížoch
37	Bolešť svalov
38	Bolešť chodidla
39	Bolešť stavcov
40	Bolesti chrbta (pohybového pôvodu)
41	Podliatiny
42	Vyklenutie platničky
43	Plantárna fasciitis
44	Fibromyalgia
45	Zlomeniny
46	Nosové zlomeniny
47	Zápaly kĺbov
48	Poranenie menisku 1
49	Poranenie menisku 2
50	Bolešť v krížoch
51	Vykĺbenia
52	Reumatické ochorenia
53	Bolešť trapézového svalu
54	Osteoartróza kolenného kĺbu
55	Osteoartróza ruky
56	Osteoporóza
57	Zápal tkaniva v okolí kĺbu, poranenia ramena
58	Následky zlomenín
59	Následky poranení
60	Reflexológia chodidla
61	Oneskorené vytvorenie kostného kalusu
62	Syndróm karpálneho tunela
63	Natrhnutie svalu
64	Bolešť prsnej bradavky
65	Bolešť päty
66	Zápal šlachy
67	Zápal paterálnej šlachy
Nočná terapia	(regenerácia) / Magnetizácia vody
Svetelná terapia	
01	Cirkulačný program - červené svetlo
02	Upokojujúci program - zelené svetlo
03	Stimulujúci program - žltá farba
04	Relaxačný program - modrá farba
05	Biodynamický program - kombinácia červenej, žltej, zelenej a modrej farby

TEST

Program
č.0


Popis

Tento program slúži na overenie správneho fungovania kanálov, výkonu zariadenia a funkčnosti magnetov DM100. Pri testovaní vždy musí byť zapojený aplikátor DM100.

Ak chcete začať TEST dotknite sa tlačidla „START“ a potom dotknite sa „(Ch 1, 2, 3, 4)“ kde máte zapojený aplikátor, aby ste zapli požadovaný kanál. V tomto bode sa tlačidlo zmení na „žlté“. Ak sa nad tlačítkom objaví v zelenom obdĺžniku „OK“ tak aplikátor funguje.

Krátkym dotykcom „Stop“ urobí sa pauza.

Bielou šípkou návrat na výber programu.

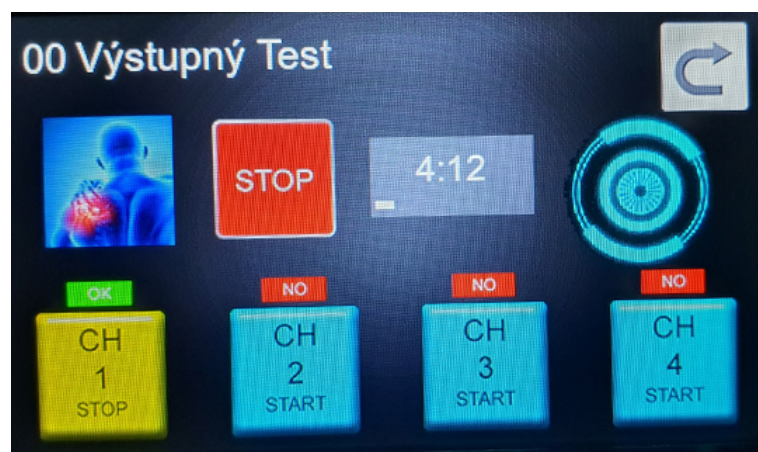

SYSTEMATICKÝ PROGRAM INTENZÍVNY SYSTEMATICKÝ PROGRAM (bolesti pohybového aparátu)


Programy
č. 01
č. 02

Popis

Tento program je odporúčanou voľbou pre zníženie bolesti, ktoré budú popísané na nasledujúcich stranách.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

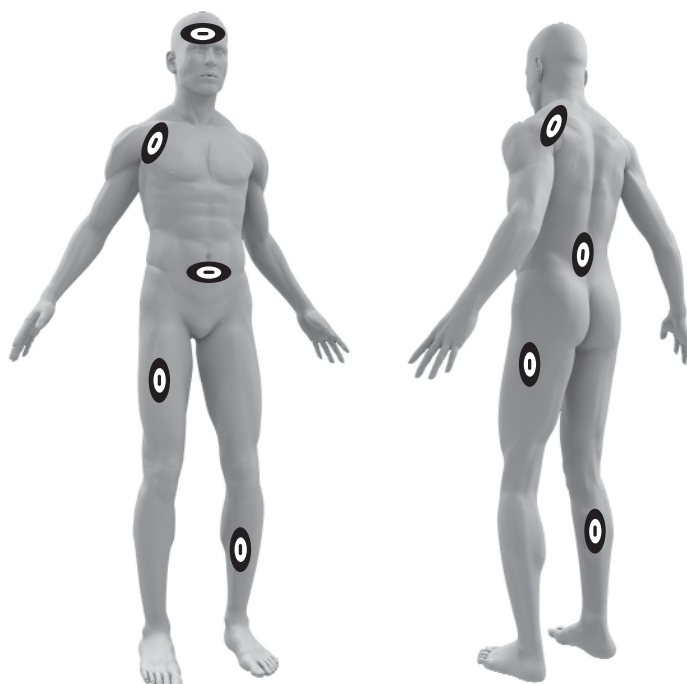

Dĺžka programu č.1: 35 minút

Dĺžka programu č.2: 50 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

BOLEŠŤ BRUŠKA CHODIDLAProgram
č. 03**Popis**

Tento program odporúčame v prípade, ak pociťujete bolesť v metatarzálnej oblasti - súčasť kostry nohy s piatimi dlhými a tenkými kosťami usporiadanými paralelne medzi kĺbmi a prstami.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

**Dĺžka programu: 25 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Artritida je chronické opotrebovanie chrupavky kĺbu spojené nerovnováhou medzi produkciou a opotrebovaním kostných buniek. Artritida je súbor zdravotných ťažkostí, ktoré spôsobujú poškodenie kĺbov, bolesť pri artritide je každodenná.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

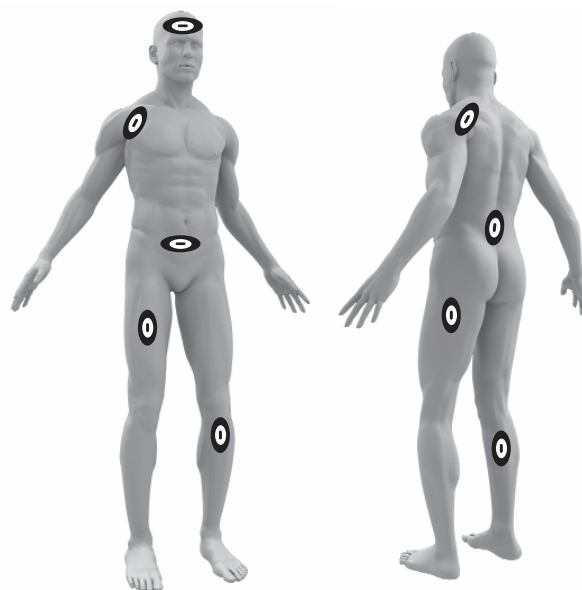

Dĺžka programu č.4: 30 minút

Dĺžka programu č.12: 60 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.




Popis

Artróza bedrového kĺbu je najbežnejšou formou artritidy. Ochorenie spôsobuje tuhosť a bolesť kĺbov, a to najmä pri pohybe.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

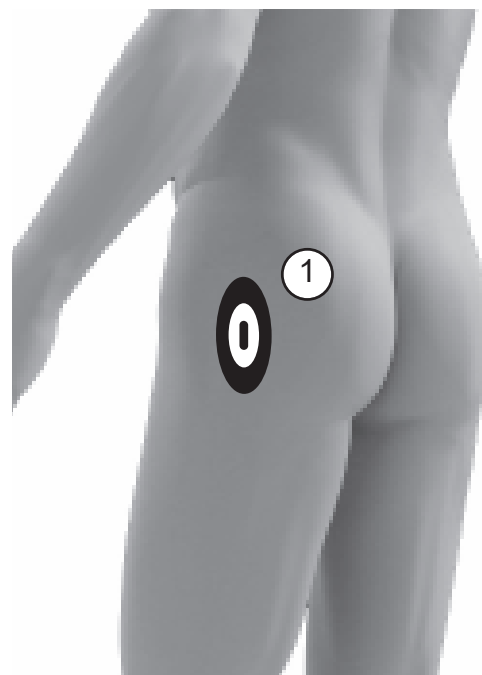**Dĺžka programu: 50 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Túto podpornú terapiu odporúčame, ak máte artrózu členkov.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.



Dĺžka programu: 45 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.




Popis

Artróza krčnej chrbtice je degenarativne ochorenie stavcov krku a je spôsobené nadmerným tlakom hypertonických svalov (napäté svalstvo). Ochorenie znižuje mobilitu a slobodu pohybu.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetické aplikátory na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ich pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov.

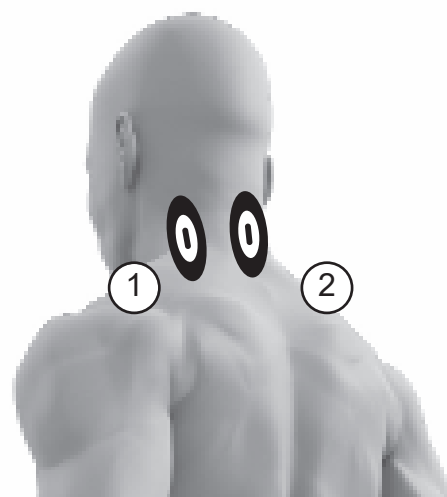**Dĺžka programu: 40 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Artróza kolena je degenartivne ochorenie postihujúce chrupavku pokrývajúcu kolenný kĺb.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov.



Dĺžka programu: 50 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.




Popis

Artróza je degenerujúce ochorenie kĺbov a kĺbovej chrupavky. Časom sa ochorenie preniesie aj na iné kĺby alebo chrupavky. Ochorenie sa prejavuje bolesťou pri pohybe lakťov a má za následok zníženú pohyblivosť pri extenzii a flexii lakťa.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

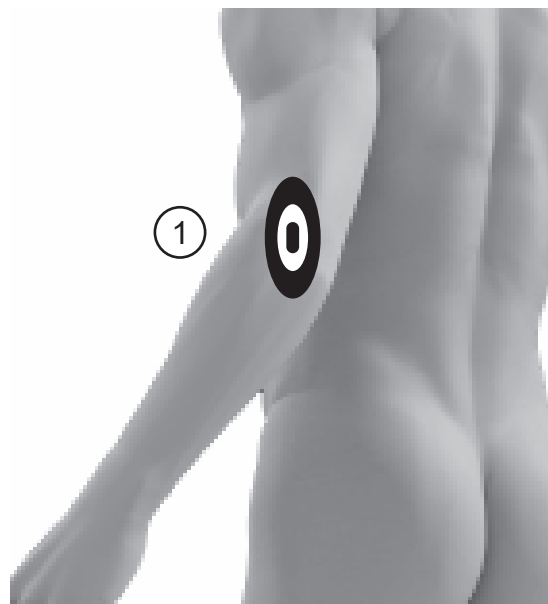**Dĺžka programu: 55 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Odporúčame pri artróze prstov.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.



Dĺžka programu: 45 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



ARTRÓZA CHRBTICE ARTRÓZA BEDROVEJ CHRBTICE


Programy
č. 11-13

Popis

Artróza chrbta je zápal strednej časti chrbtice v dôsledku opotrebenia chrupavky kĺbov a postupnej zmeny kostného tkaniva a svalov. Artróza bedrovej časti chrbta sa prejavuje v spodnej časti chrbta.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

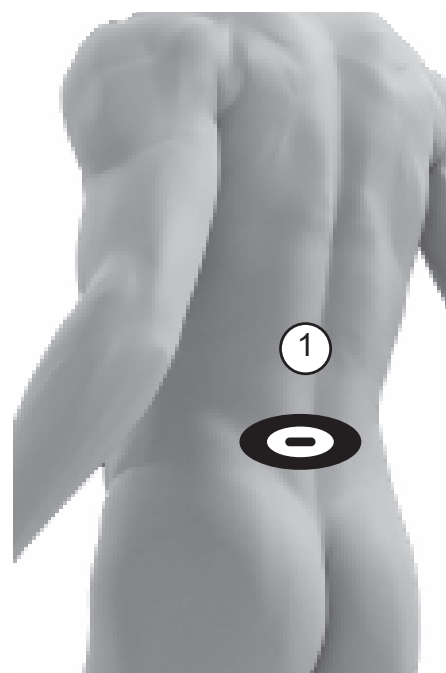

Dĺžka programu č.11: 40 minút

Dĺžka programu č.13: 45 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.



Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Ak trpíte artritidou rúk alebo zápästia, postupujte podľa pokynov nižšie.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.



Dĺžka programu č.14: 40 minút

Dĺžka programu č.15: 50 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.



Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.




Popis

Artróza ramena je spôsobená predčasným opotrebovaním ramenných kĺbov, ktoré v dôsledku ochorenia neumožňujú normálnu funkciu horných končatín. Ochorenie sa prejavuje značnou bolesťou.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov.

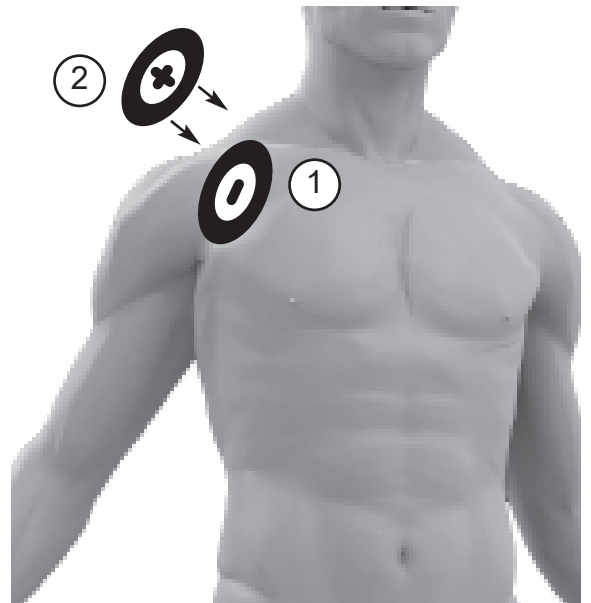**Dĺžka programu: 45 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Burzitída je zápalové ochorenie mazového vaku v okolí kĺbu a spôsobuje bolesť pri pohybe šliach. Pohyb šliach pri zápale navyše zhoršuje už vzniknutý zápal, čo spomaľuje následnú liečbu a problém zvyčajne pretrváva.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

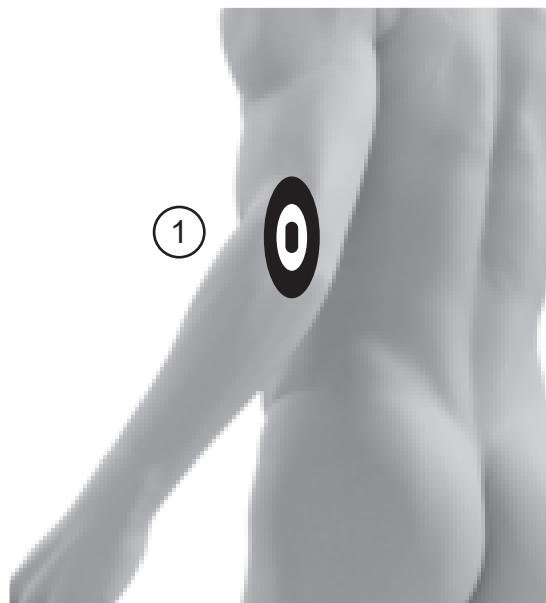

Dĺžka programu: 30 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



Popis

Chondropatia je ochorenie spôsobujúce bolesť tkaniva chrupavky v oblasti jabĺčka.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov.

**Dĺžka programu: 40 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Pomliaždeniny sú výsledkom traumatických zranení, vrátane straty krvi.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.



Dĺžka programu: 35 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.




Popis

Diskopatia je degenerácia medzistavcovej platničky, ktorá je umiestnená medzi stavcami. Platničky slúžia na uľahčenie pohybu a zmiernenie otrasov tela.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

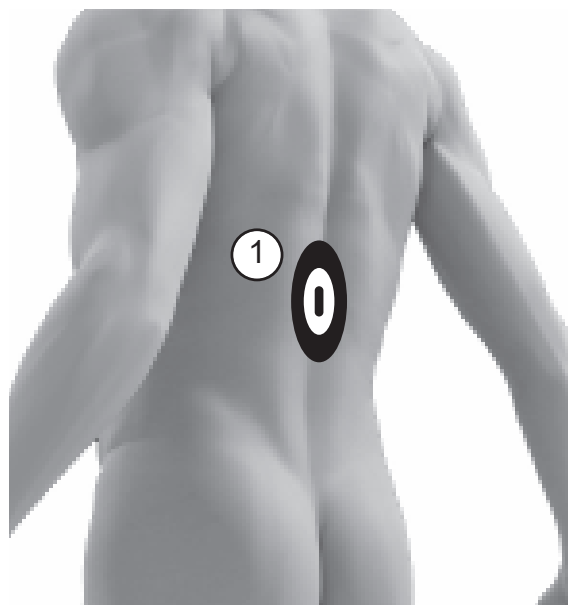**Dĺžka programu: 35 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Podvrtnutie kolena je najčastejšie výsledkom traumy spôsobenej športom alebo prácou, kedy je kolenný kĺb vystavený extrémnej záťaži. Podvrtnutie kolena má za následok sťažený pohyb. Podvrtnutie je poranenie šliach, ktoré je spôsobené neodhadnutím svojich fyzických možností.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov.



Dĺžka programu č.21: 25 minút

Dĺžka programu č.22: 30 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



BOLEŠŤ KONČATÍN - BOLEŠŤ LAKŤA BOLEŠŤ ZÁPÄSTIA

Programy
č. 23-24
25

Popis

Bolešť v lakti môže byť spôsobená artritídou, traumou kĺbov, svalov, šliach a väzov. Najčastejším príznakom je tenisový lakeť, ktorý je zvyčajne spôsobený ťažkou prácou v záhrade, alebo športom, pri ktorom je držanie ruky neprirodzené, atď..

Bolešť zápästia môže byť spôsobená traumou šliach, neuritídou alebo artritídou, ktoré obmedzujú pohyb ruky.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.



Dĺžka programu č.23: 60 minút / programu č.24: 35 minút

Dĺžka programu č.25: 25 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.



Potrebný počet terapií


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Ruka je najuniverzálnejšou časťou nášho tela. Z tohto dôvodu je často vystavená traumám a zvlášť negatívny dopad majú na ňu degeneratívne procesy starnutia a opotrebovania kĺbov.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

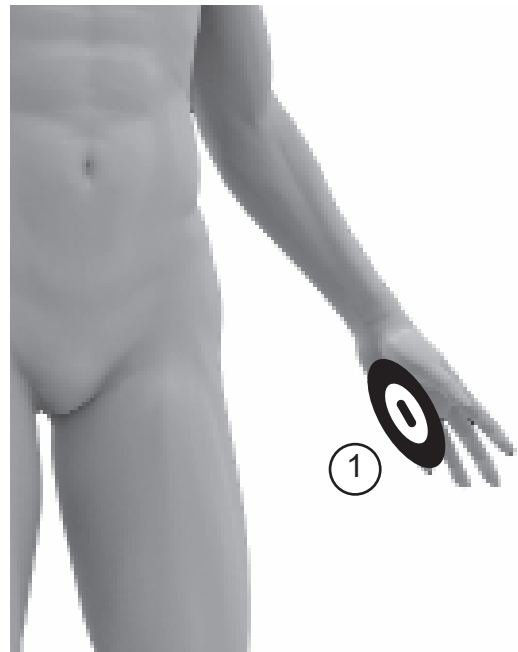

Dĺžka programu: 30 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



Popis

Bolešť členka môže byť vyvolaná rôznymi faktormi, ako sú traumy či pomliaždeniny väzov, ale aj únavou spôsobenou nadmerným používaním tohto kĺbu, napríklad po dlhej prechádzke.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

**Dĺžka programu: 60 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Bolešť krčnej chrbtice je bolesť pociťovaná na zadnej strane krku. Bolesť začína od krku a postupuje smerom k ramenám a v závažných prípadoch až k rukám, čo má za následok aj zníženú mobilitu.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetické aplikátory na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ich pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov.

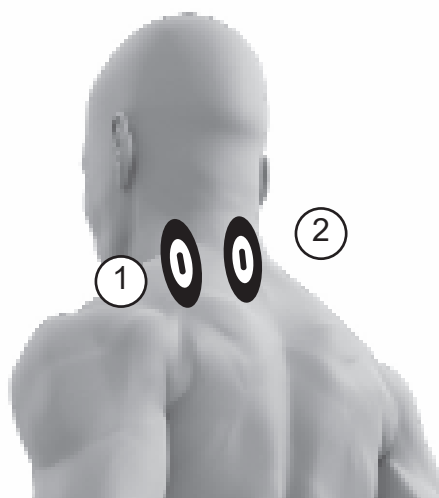

Dĺžka programu: 60 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.




Popis

Bolešť chrbtice (krčnej / bedrovej) je spôsobená nesprávnym držaním tela alebo nevhodným pohybom, degeneratívnymi procesmi alebo kontinuálnym preťažením a navyše spôsobuje ďalšie problémy svalov, šliach a väzov.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

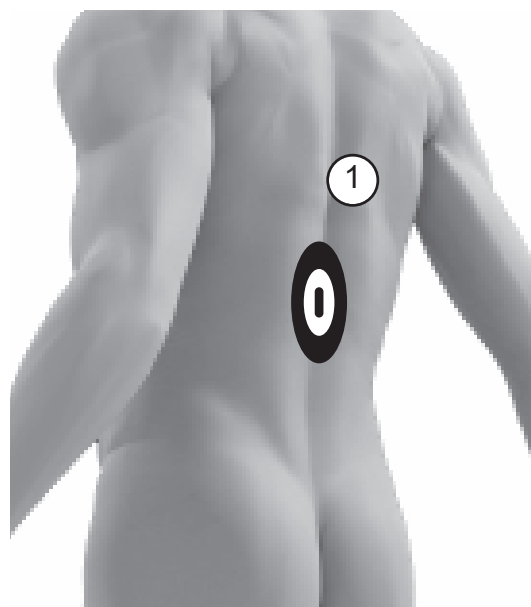**Dĺžka programu: 30 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Koxartróza je chronické degeneratívne ochorenie chrupavky bedrového kĺbu v dôsledku postupného opotrebenia kĺbov. Ochorenie spôsobuje problémy s mobilitou.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

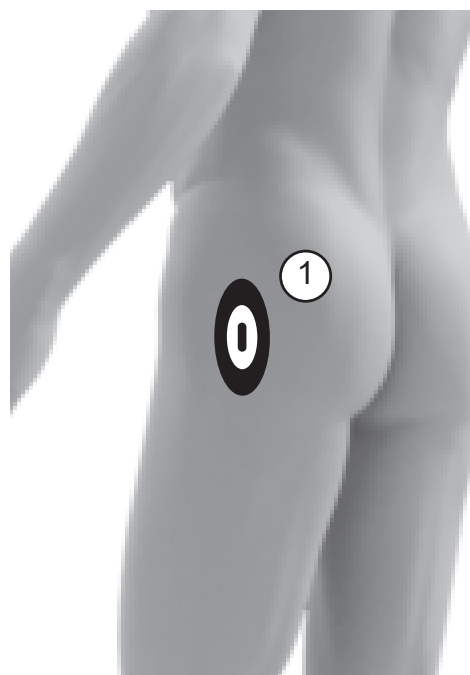

Dĺžka programu: 30 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.




BOLEŠŤ DELTOVÉHO SVALUProgram
č. 31**Popis**

V prípade bolesti ramien odporúčame podpornú liečbu deltových svalov ramien.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

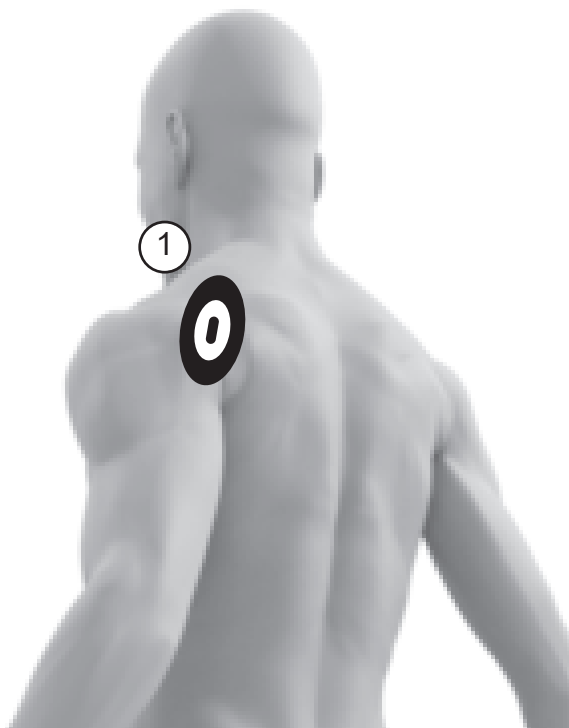**Dĺžka programu: 35 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

V prípade bolesti prednej časti stehna odporúčame podpornú liečbu švorhlavého svalu stehna.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.



Dĺžka programu: 30 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.




Popis

Odporúčaný program pre podpornú liečbu ochorení a bolestí súvisiacich s pohybovým aparátom, ktoré nie sú v príručke popísané.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

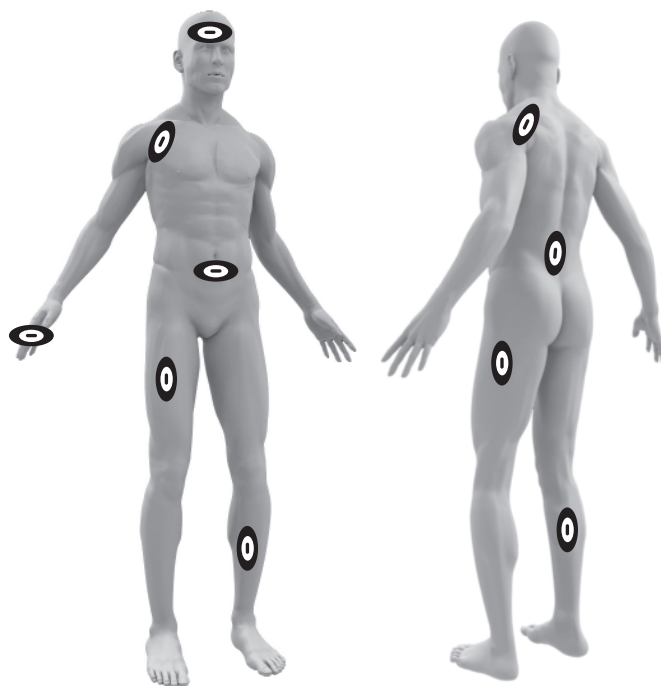**Dĺžka programu: 40 minút**

Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.


Popis

Túto podpornú liečbu odporúčame pri všeobecných bolestiach chrbta.

Bolešť ramena môže byť spôsobená rôznymi typmi ochorení kĺbov, ako je artritída, neuritída alebo burzitída.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

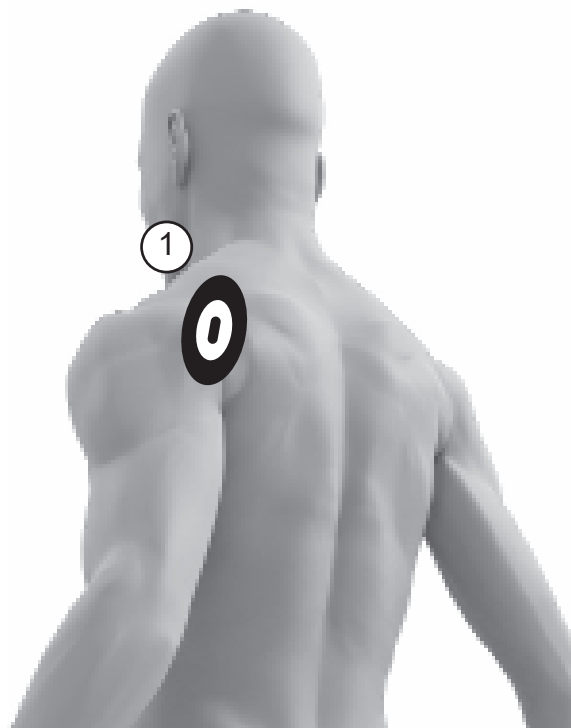

Dĺžka programu č.34: 60 minút

Dĺžka programu č.35: 60 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.




**BOLEŠŤ BEDROVEJ CHRBTICE A
BOLEŠŤ V KRÍŽOCH**Program
č. 36**Popis**

Bolešť v bedrovej časti chrbtice môže byť akútna alebo chronická a môže pochádzať z miechy alebo nervov. Menej často môže bolesť pochádzať z hlbších štruktúr tela, napr. od obličiek, pankreasu, hrubého čreva, panvových orgánov.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

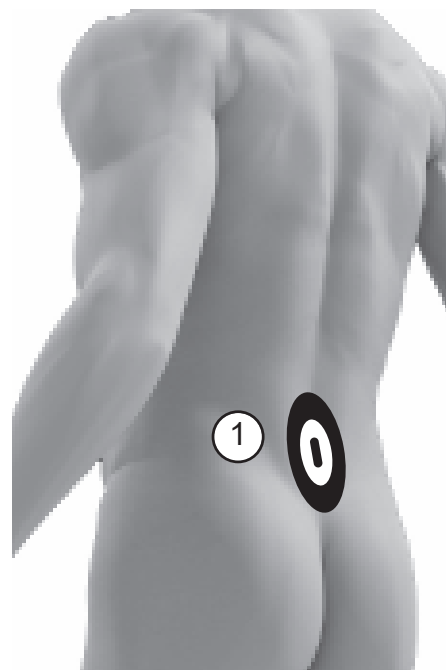**Dĺžka programu: 30 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Bolesti svalov sú častým fenoménom a môžu naraz zahŕňať hneď niekoľko svalov. Bolest svalov môže dokonca zahŕňať aj väzy, šľachy, svaly, fascie a mäkké svaly, na ktoré sa pripájajú svaly, kosti a orgány. Bolest svalov je často spôsobená nadmerným napätím alebo svalovými léziami v dôsledku cvičenia alebo fyzicky namáhavej práce.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

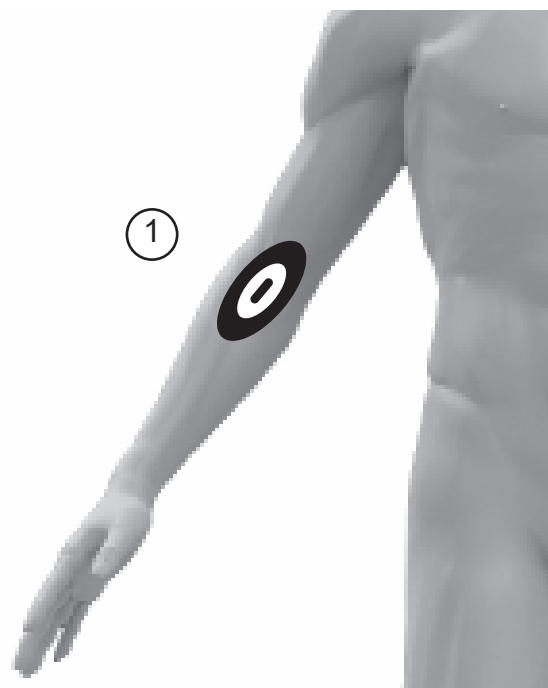

Dĺžka programu: 40 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



BOLEŠŤ CHODIDLAProgram
č. 38**Popis**

Ak pociťujete bolesť chodidiel, tento program je práve pre vás.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

**Dĺžka programu: 25 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Boleť stavcov väčšinou spôsobuje široký systém tenkých nervov, ktoré vychádzajú zo stavcov, prechádzajú cez väzy až do platničiek. Nedávne štúdie ukazujú, že primárnou príčinou bolesti stavcov je najmä zlé držanie tela, zlá fyzická kondícia, obezita a stres.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.



Dĺžka programu: 20 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



BOLESTI CHRBTIA (pohybového pôvodu)Program
č. 40**Popis**

Boleť chrbtice je bolesť v ktorejkoľvek časti chrbta.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

**Dĺžka programu: 30 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.


Popis

Hematóm je krvná zrazenina mimo krvnej cievy. Zvyčajne ide o výsledok krvácania, alebo presnejšie povedané, vnútorného krvácania.

Prolaps medzistavcovej platničky (alebo tiež jej vyskočenie) je bolestivé poranenie väzivovej chrupavky platničky medzi stavcami chrbtice, najčastejšie sa vyskytuje v oblasti bedrovej chrbtice.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

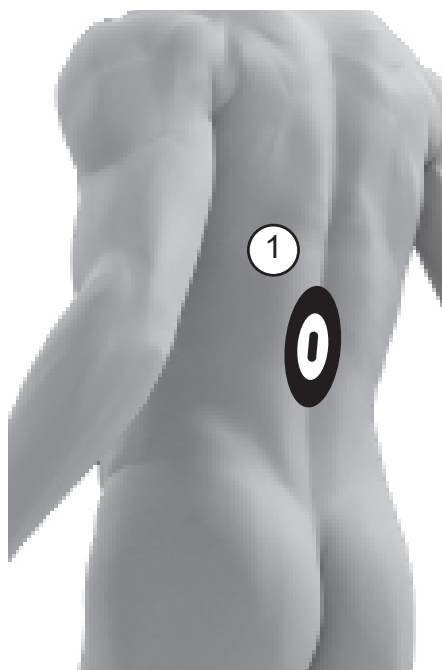

Dĺžka programu č.41: 25 minút

Dĺžka programu č.42: 30 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



Popis

Plantárna fascia je najčastejšou príčinou bolesti päty. Postihuje najmä ľudí, ktorí sa aktívne venujú športu. Plantárna fascia je spôsobená opakovanou nadmernou záťažou päty.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

**Dĺžka programu: 40 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Fibromyalgia je syndróm charakterizovaný chronickou bolesťou svalov spojenou s ich tuhnutím. Ide najmä o stavce chrbtice, ramená, panvový pletenec, paže, zápästia, stehná.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

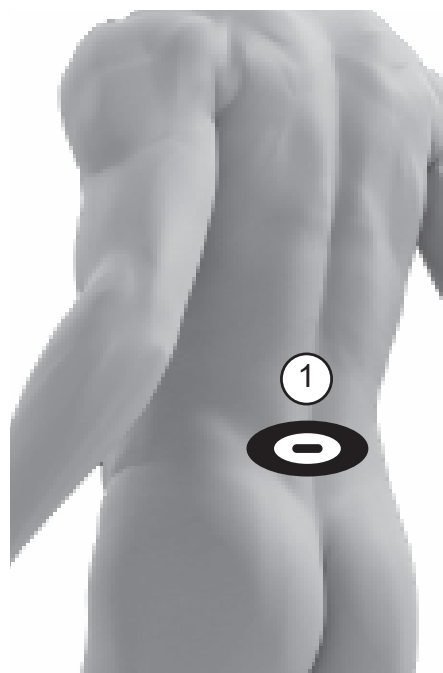

Dĺžka programu: 40 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.



Potrebný počet terapií

Odzva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Fraktúra je zlomenina kosti.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

**Dĺžka programu: 50 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Tento program odporúčame pri zlomenine nosa.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

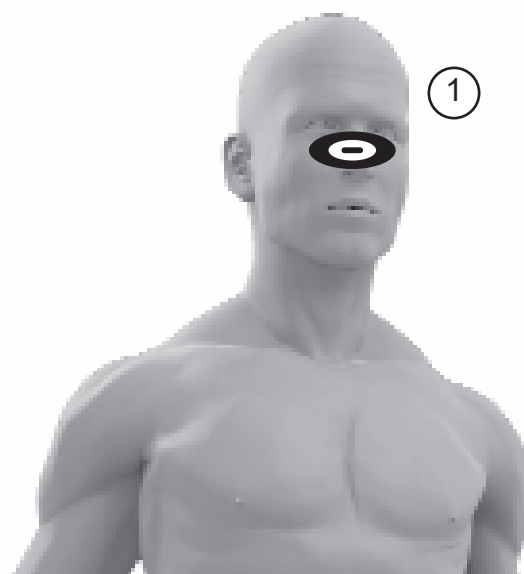

Dĺžka programu: 40 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



ZÁPALLY KLÍBOV - PORANENIE MENISKU 1 PORANENIE MENISKU 2

Programy
č. 47-48
č. 49

Popis

Zápal (bolest, začervenanie, opuch, zvýšený pocit tepla) klbu (spojivo dvoch kostí, ktoré umožňuje pohyb). Meniskus sa skladá z tkaniva väzivovej chrupavky a v kolennom kĺbe zohráva veľmi dôležitú úlohu. V prípade závažných lézií by ste mali zvoliť "PORANENIE MENISKU 2".

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov.



Dĺžka programu č.47: 50 minút

Dĺžka programu č.48: 30 minút

Dĺžka programu č.49: 35 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.



Potrebný počet terapií


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Bolešť v bedrovej oblasti ovplyvňuje bedrovú oblasť a krížovú oblasť.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

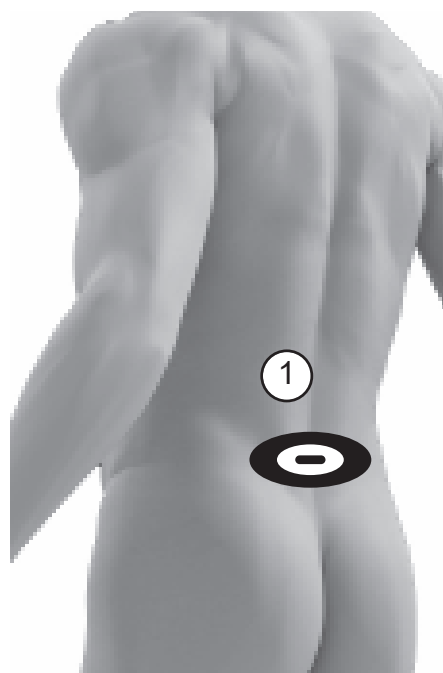

Dĺžka programu: 30 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



VYKLÁBENIA REUMATICKÉ OCHORENIA

Programy

č. 51

č. 52


Popis

Dislokácia kĺbu nastane, ak sa hlavica kosti dostane mimo jamky kĺbu. Dislokácia je často spôsobená náhlym dopadom na kĺb, čo spôsobí poškodenie väzov.

Reuma je nešpecifický termín pre zdravotné problémy, ktoré majú vplyv na kĺby a spojivé tkanivo.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

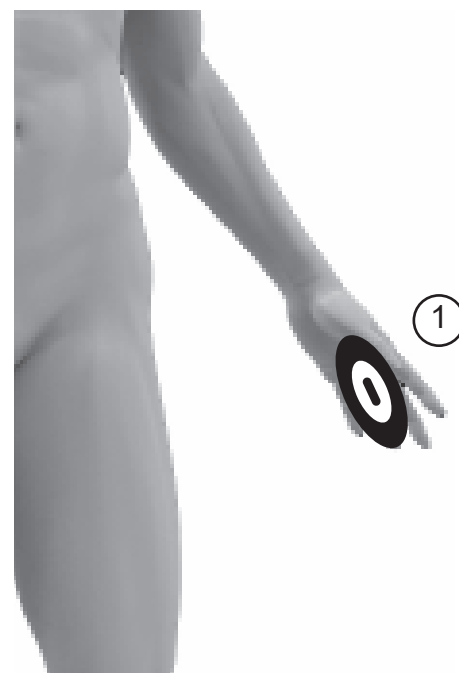

Dĺžka programu č.51: 30 minút

Dĺžka programu č.52: 30 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.



Potrebný počet terapií


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Bolesti trapéz sú opakujúce sa bolesti trapéz (sval umiestnený medzi ramenom a krkom), ktoré sú najčastejšou formou bolesti medzi pracujúcimi ľuďmi.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

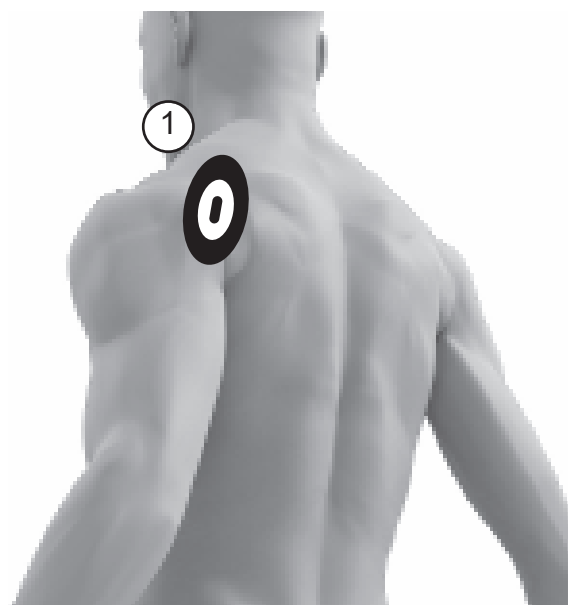

Dĺžka programu: 30 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



Popis

Osteoartritída je najčastejšia forma artritídy vyznačujúca sa degeneráciou kĺbovej chrupavky. Túto podpornú liečbu odporúčame pri gonartróze.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov.

**Dĺžka programu: 30 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Osteoartritída je najčastejšia forma artritídy, vyznačujúca sa degeneráciou kĺbovej chrupavky. Túto podpornú liečbu odporúčame pri artritíde rúk.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

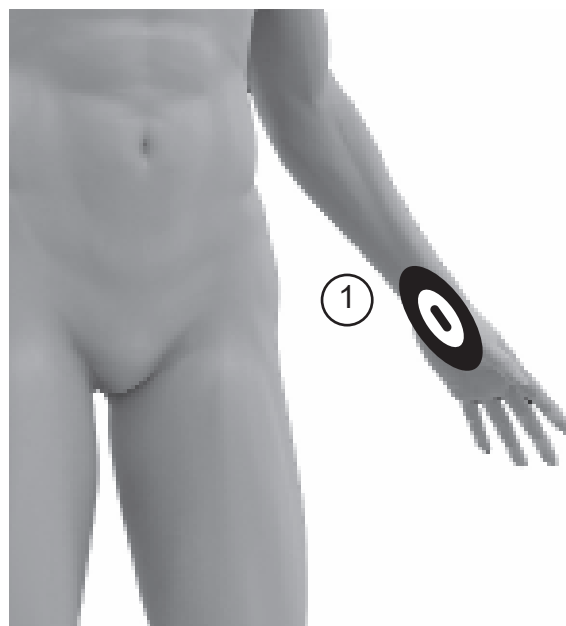

Dĺžka programu: 20 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.




Popis

Osteoporóza je stav, pri ktorom sú kosti náchylnejšie na zlomeniny z dôvodu zníženia hmotnosti kostí a zmien v mikroštruktúre kostí. V prípade, ak osteoporézou trpíte, tento program je určený práve pre vás.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov.

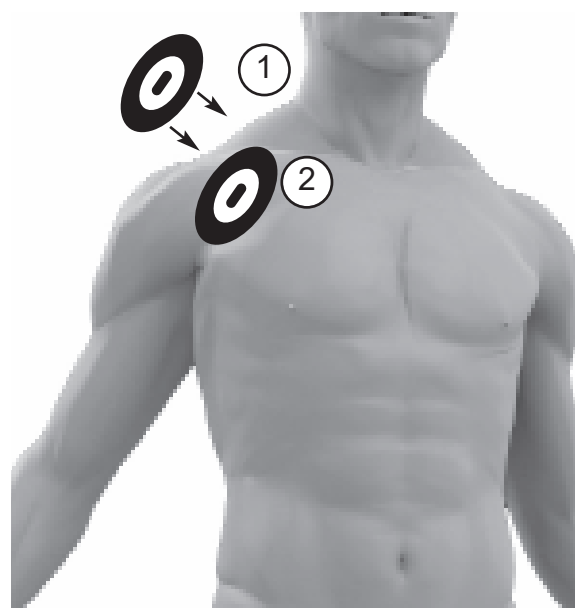**Dĺžka programu: 45 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

“Periartritída” je ochorenie, ktoré postihuje oblasť ramien a najčastejšie ním trpia ľudia v strednom veku. Hlavnými znakmi sú bolesť a strata pohyblivosti v kĺbe ramena.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov.

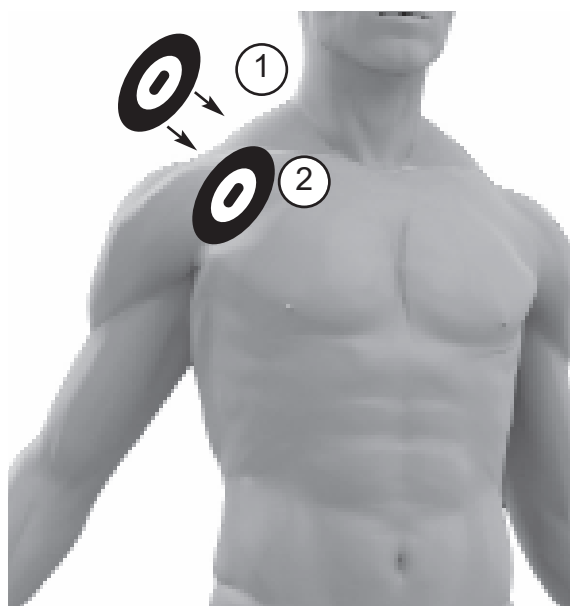

Dĺžka programu: 55 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



NÁSLEDKY ZLOMENÍN NÁSLEDKY PORANENÍ

Programy

č. 58


č. 59

Popis

Niektoré zlomeniny alebo lézie so sebou prinášajú dlhodobejšie následky.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

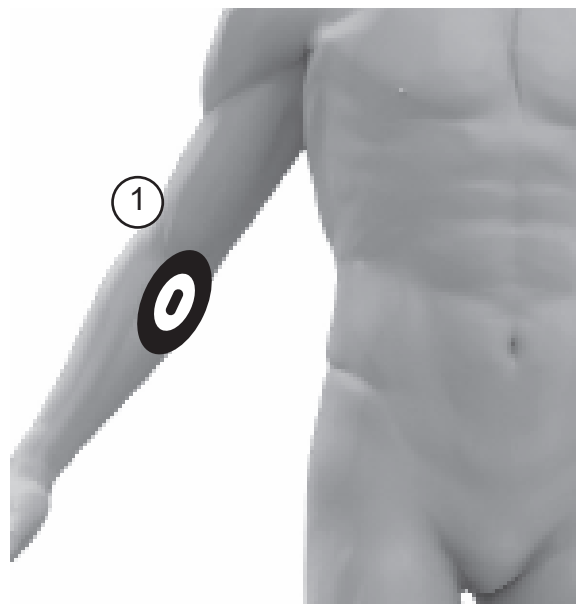

Dĺžka programu č. 58: 20 minút

Dĺžka programu č. 59: 30 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.



Potrebný počet terapií


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Tento program uvoľní vaše telo a udržiava ho v dobrej forme a kondícii. Napomáha pri ťažkých a opuchnutých nohách.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetické aplikátory na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ich pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov.

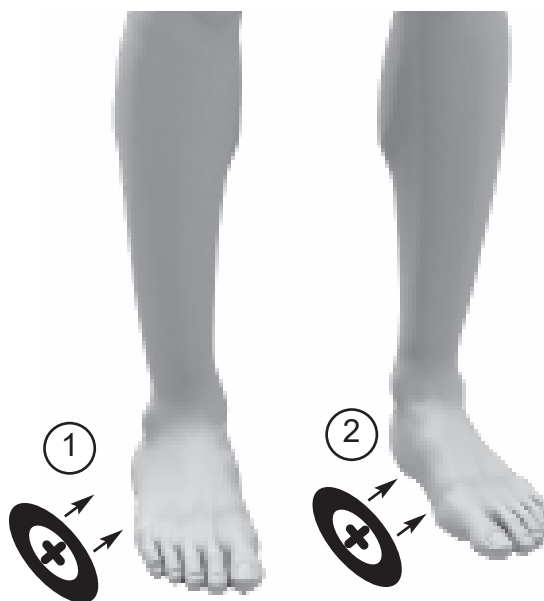

Dĺžka programu: 30 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



ONESKORENÉ VYTVORENIE KOSTNÉHO KALUSU

Program
č. 61

Popis

Tento program odporúčame pri doliečovaní zlomenín a ich zrastaní po zlomenine.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.



Dĺžka programu: 35 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.



Potrebný počet terapií


Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Syndróm karpálneho tunela je stav, pri ktorom sa v zápästí stlačí stredový nerv, čo vedie k zníženej citlivosti a svalovej slabosti v rukách.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

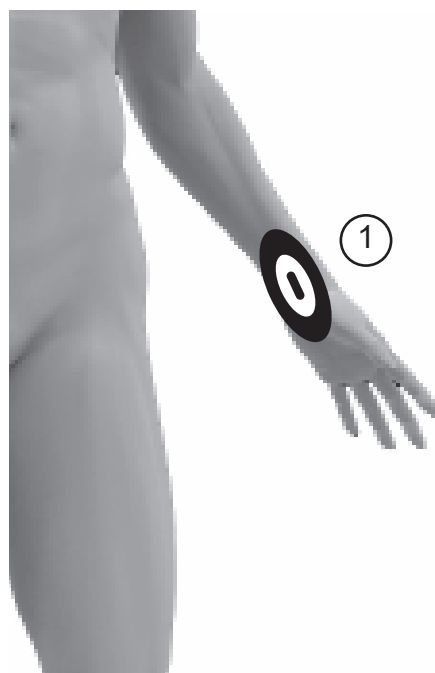

Dĺžka programu: 45 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.




Popis

Natiahnuté svalstvo (najčastejšie sa to týka lýtok, stehien a predlaktí) je poškodené a pri svojej regenerácii vytvára bolesť.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.

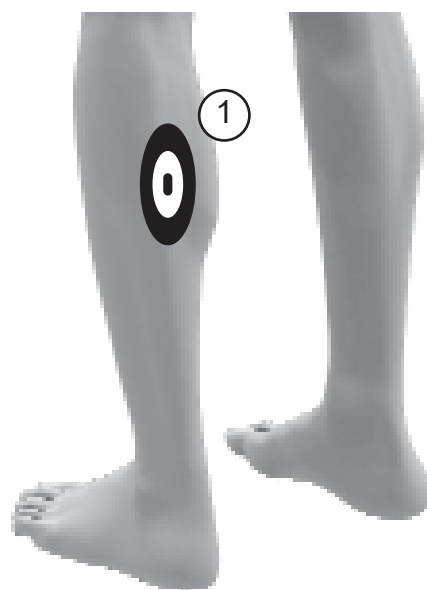**Dĺžka programu: 35 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis

Problémy s talusom sú zvyčajne spojené so zápalom päty – spodná časť päty a členka. Bolešť päty je spôsobená podráždením väzu nachádzajúceho sa v dolnej časti chodila. Zápal šliach je druh tendinopatie, tento termín sa používa pre zranenia šliach, ktoré zahŕňajú akútne zranenia sprevádzané zápalom.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného kanála.



Dĺžka programu č.64: 30 minút

Dĺžka programu č.65: 35 minút

Dĺžka programu č.66: 30 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.



Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

ZÁPÁL PATERÁLNEJ ŠLACHY

Program
č. 67

Popis

Zápal patelárnej šľachy indikuje degeneráciu a zápal šľachy, ktorá je umiestnená pod jabĺčkom. Najčastejšie je táto šľacha preťažená u profesionálnych športovcov (časté skoky či výskoky). Tento zápal je častý aj u hráčov basketbalu, futbalu, volejbalu, ale aj u bežcov.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov.



Dĺžka programu: 40 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.



Potrebný počet terapií

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

NOČNÁ TERAPIA MAGNETIZÁCIA VODY

Popis

S magnetoterapiou môžete pokračovať aj v noci, stačí, ak použijete Bio-Mat. Kombinovaním denných a nočných procedúr dosiahnete želané výsledky omnoho rýchlejšie.

Magnetizovaná voda s MAG Water (NIAG) pomáha k zlepšeniu fungovania celého organizmu.

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite podložku Bio-Mat (Koral Relax systém) na posteľ s označením cca 10 cm od vrchnej časti matraca. Pripojte podložku Bio-Mat určeným káblikom do jedného výstupného kanálu.

Pripojte MAG Water určeným káblikom do výstupného kanálu.



Dĺžka programu nočná terapia: 240 minút

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Dĺžka programu magnetizácia vody: 120 minút

Odporúčaná dĺžka programu je minimálne 120 minút. Po uplynutí času ukončíte program, a zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

Potrebný počet (NOČNÁ TERAPIA)

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať 1 krát denne, po dobu 20 dní.



SVETELNÁ TERAPIA

Program
č. 1-5

Popis

SVETELNÁ TERAPIA PLATIMED

MAG 204N

Cirkulačný program - červené svetlo		
Upokojujúci program - zelené svetlo		
Stimulujúci program - žltá farba		
Relaxačný program - modrá farba		
Biodynamický program - kombinácia červenej, žltej, zelenej a modrej farby		

Pripojenie príslušenstva

Umiestnite CHROMO aplikátor na požadované miesto ledkami smerom k pokožke a upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor aplikátora CHROMO do výstupného kanálu.

**Dĺžka programu 1,2,3,4,5: 20 minút**

Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.

Po skončení programu sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach.

**Potrebný počet terapií**

Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

CERTIFIKÁT

Ministero della Salute
DGDFSC
0056161-P-06/08/2012
I.5.I.e.1/2012/153

MOD. 18 U.G.

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE
Off. 03 ex DGFD

MODULO SALUTE - 18

109691511

MODULO SALUTE - 18

MODULO SALUTE - 18

DGDFSC.3/P/I.5.I.e.1/153/2012

VISTA la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;
HAVING REGARD to Directive 93/42/EEC concerning medical devices;
VISTO il Decreto Legislativo n. 46/97 e successive modifiche recante il recepimento della direttiva 93/42/CEE;
HAVING REGARD to the Legislative Decree n. 46/97 and its following amendments implementing Directive 93/42 EEC;
VISTA la richiesta datata 13/07/2012, prot. 52144-A-20/07/2012 presentata dalla ditta **PLATIUMED S.r.l.**, con sede in 36015 Schio (VI), Via Aspromonte 17, Italia - P. Iva/codice fiscale 02758560243;
HAVING REGARD to the request dated July 13th 2012, ref.52144-A-20/07/2012, submitted by the Company **PLATIUMED S.r.l.**, located in 36015 Schio (VI), Via Aspromonte 17, Italy, VAT No/fiscal code 02758560243;
CONSIDERATO che la ditta richiedente ha effettuato i versamenti richiesti dal D.M. 24 maggio 2004;
WHEREAS the Company paid the fees required by Ministerial Decree May 24, 2004;
VISTI gli atti d'ufficio;
HAVING REGARD to the official deeds:

SI ATTESTA IT IS ATTESTED

che la Ditta **PLATIUMED S.r.l.** con sede in 36015 Schio (VI), Via Aspromonte 17, Italia, è il fabbricante e ha marcato CE come dispositivo medico, secondo le procedure previste dalla direttiva 93/42 CEE il prodotto:

that, according to Directive 93/42/EEC, the Company **PLATIUMED S.r.l.** located in 36015 Schio (VI), Via Aspromonte 17, Italy, is the manufacturer and has marked CE as medical device the following product:

Electro therapy and magneto therapy devices/Apparati per elettroterapia e magnetoterapia, mod. : "MAG204"

Tale prodotto, in base all'art. 4 della citata direttiva, è di libera circolazione e può essere messo in commercio in Italia e in tutto il territorio dell'Unione Europea.

The above mentioned product, according to the art. 4 of Directive 93/42/EEC, can freely circulate and can be placed on the market in Italy and all over the European Union.

Questo documento è rilasciato in unico originale a richiesta del fabbricante ai fini di esportazione di dispositivi medici **al di fuori dell'Unione Europea.**

This document has been issued in an unique original version upon request of the manufacturer in order to export medical devices to **Countries outside European Union.**

Non è consentita la sua riproduzione o pubblicazione su carta, stampa, supporti elettronici o siti internet.

It is not allowed any reproduction or publication of this document by paper, press, electronic base or websites.

Ne è consentita la sola esibizione o consegna alle autorità doganali o sanitarie del paese di importazione.

It is only allowed to show or to delivery it, upon request of the customs or Health Competent Authorities of the importing country.

Il Direttore dell'Ufficio
The Office Manager
Dr. Annamaria DONATO



Reg. Numero /
Reg. Number MED 20022
Data di rilascio /
Issuing date 2001-02-09
Data di scadenza /
Expiring date 2021-02-08

Revisione /
Revision 15
Data di ultima modifica /
Last modification date 2016-01-29

Pagina / Page 1 di / of 9

Certificato CE del Sistema di Garanzia della Qualità/ EC Quality Assurance System Certificate

Si certifica che, sulla base dei risultati degli audit effettuati, il Sistema completo di garanzia di Qualità dell'Organizzazione/ We certify that, on the basis of the audits carried out, the full Quality Assurance System of the Organization:

PLATIUMED S.r.l.

Sede Legale e Operativa / Registered and operational headquarter:
Via Aspromonte, 17
36015 Schio, VI - Italia

è conforme ai requisiti applicabili della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche ed integrazioni, Allegato II escluso il pto 4, attuata in Italia con Dlgs. 46 del 1997/02/24 e successive modifiche ed integrazioni per le seguenti tipologie di Dispositivi Medici/ Is in compliance with the applicable requirements of 93/42/EEC Directive as amended, Annex II without point 4, transposed in Italy by Dlgs. 46 of 1997/02/24 as amended for the following Medical Devices:

Dispositivi per elettroterapia, magnetoterapia, ultrasuonoterapia / Electro therapy ,
magneto therapy and ultrasound therapy devices
Dispositivi per magnetoterapia / Magneto therapy devices

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding Srl
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

CERMET

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- Programy: 68 programov (nízka frekvencia), 68 programov (vysoká frekvencia) a 5 programov svetelná terapia
- Možnosť vykonávať dve rôzne terapie v rovnakom čase
- Kanály: 4 kanály (nízka frekvencia) a 4 kanály (vysoká frekvencia)
- Pracovná frekvencia s duálnym systémom: nízka frekvencia od 1Hz do 100Hz a vysoká frekvencia do 27,1 MHz
- Magnetická sila - 100 gaussov (10 000 μ T) pre kanál spolu 400 gaussov (40 000 μ T)
- Svetelná terapia rozsah vlnových dĺžok od 470 nm - 635 nm s aplikátorom CHROMO
- Detekcia príslušenstva: automatická
- Farebný dotykový displej
- Automatický samočinný test pri každom zapnutí
- Automatické vypnutie pri nečinnosti po 5 minútach
- Automatické nastavenie času terapie
- Zvuková signalizácia ukončenia terapie
- Napájanie: 240V AC transformátor
- Spotreba energie: max. 45W
- Ochrana proti skratu
- Prevádzkové prostredie: 15°C až 26°C 700-1060hPa
- Skladovacie prostredie: -10°C až 50°C 700-1060hPa
- Vlhkosť: 15-85% (nekondenzujúca)
- Záruka: 6 rokov
- Rozmery prístroja: 33 x 4,5 x 24,5 cm
- Hmotnosť prístroja: 2,2 kg
- Klasifikácia: Zdravotnícka pomôcka triedy IIa.
- Kvalita: Výroba spĺňa požiadavky ISO 13485:2003. MAG 204N vyhovuje požiadavkám na zdravotnícke pomôcky uvedeným v smernici 93/42/EHS.
- Cermet certifikát: zdravotnícky prístroj CE0476

Výrobca: PlatiuMed S.r.l., Via Aspromonte 17, 36015 SCHIO (VI) - Italy

Notifikovaný orgán: Kiwa Cermet Italia S.p.A., Via Cadriano 23,

40057 Cadriano di Granarolo (BO), Tel. 051 - 459.3.111, Fax 051 - 763382

Distribútor pre Slovensko: 4 LIFE SK s.r.o., Hurbanova 4, 010 01 Žilina, tel. 0910 300 600

Dátum vydania návodu na použitie: 2024.03.